
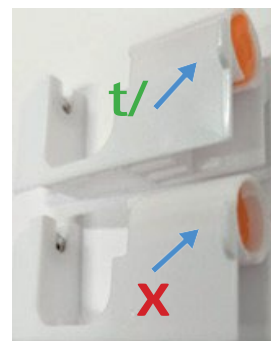



Beste praksis for nøyaktig piercing

1. Sjekk kapselen din


For å sikre en nøyaktig piercing, sjekk kapselen for riktig justering. En riktig justert kapsel betyr at kapselspissen ikke stikker ut og at kapselens bakside er i flukt med patronen. Bildene til høyre viser **riktig t/** og feil **X-justering** av kapselspissen og baksiden.

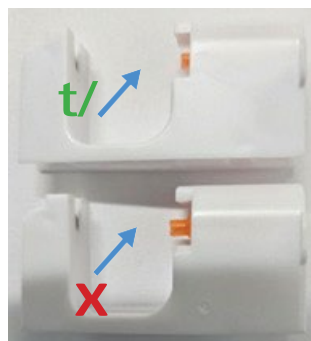

Se på kapselen din før du legger den i instrumentet. Hvis den ikke er riktig justert, følg trinnene nedenfor for å korrigere den. Vær oppmerksom på at disse trinnene må følges nøyaktig for å opprettholde steriliteten til den gjennomborende øredobben.

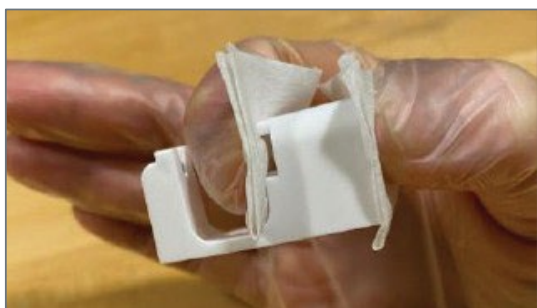

1. Mens du har på deg et nytt par rene engangshansker, dekker du tuppen av patronen der kapselen stikker ut med en ny alkoholserviett.
2. Dekk baksiden av patronen med et ekstra alkoholhåndkle.
3. Skyv kapselen forsiktig tilbake til den er riktig justert som vist på bildene ovenfor.

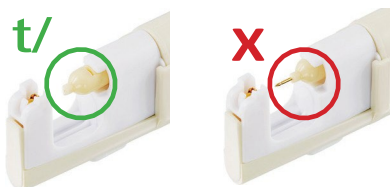

1. Sikt ved hjelp av kapselspissen, ikke øredobbstolpen

Å skyve øredobben ut av kapselen før piercing kan føre til at øredobben går ut av kurs og kan forårsake at man ikke treffer riktig. Sikt mot piercing plasseringsprikken med den forlengede enden av den indre kapselen. IKKE skyv tuppen av øredobben ut av kapselen før du er klar til å ta hull i øret.

1. Sjekk varenummeret på kassetten

Pass på at varenummeret på kassetten din stemmer overens med varen kunden din har valgt. Hvis mulig, bekreft visuelt at du har riktig vare i kassetten ved å sjekke baksiden av kapselen som vist på bildet til høyre. Merk: *piercing-øreringer som krever et avstandsstykke vil ikke være synlige gjennom kassetten.*

inverness®

Safe & Gentle Ear Piercing